


■開栓後の安定性(0週目のみ検量)

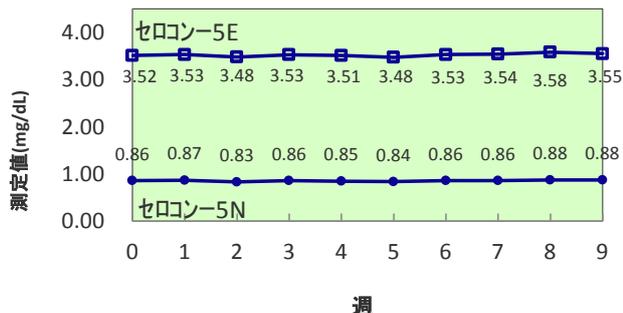

■同時再現性

(単位:mg/dL)

	SERUM I	SERUM II
N	20	20
MEAN	0.849	3.562
MIN	0.83	3.52
MAX	0.88	3.59
R	0.05	0.07
SD	0.012	0.017
CV(%)	1.36	0.47

■包装

製品コード	製品内容	包装形態
A583-75	CRE-N(R-I)	30ml×2
A583-05	CRE-N(R-II)	10ml×2
A583-17	CRE-N(R-I)	60ml×4
A583-27	CRE-N(R-II)	30ml×4
A583-12	CRE-N(R-I)	80ml×4
A583-22	CRE-N(R-II)	40ml×4
A583-30	CRE-N(R-I)	180ml×3
A583-40	CRE-N(R-II)	60ml×3

■参考基準範囲

血清: 男 0.4~1.1mg/dL 女 0.3~0.8mg/dL

社内データ男984例,女889例よりパラメトリック法にて算出

■貯法及び有効期間

2~10°C保存 製造後1年(開封後は2カ月)

※使用上の注意等は添付文書をご参照下さい。



株式会社 セロテック

お問い合わせ先(企画開発室)

〒062-0021 札幌市豊平区月寒西1条8丁目8-7

TEL 011-855-1131 FAX 011-855-0143

E-mail: kikaku@serotec.co.jp

www.serotec.co.jp

'201507,1000